



Stethoskope Stethoscopes



Stethoskope | Stethoscopes

KLINISCHE AUSKULTATION | CLINICAL AUSCULTATION

Die Auskultation ist eine klinische Untersuchungsmethode von überragender Bedeutung, welche eine rasche Diagnose des Patienten-Status ermöglicht. Auskultation ist die Aufnahme von Schallphänomenen, welche aus der Funktion von bestimmten Körperorganen auftreten. Dies ist durch die Anwendung von Stethoskopen bewerkstelligt, welche geradezu ein Markenzeichen medizinischen Fachpersonals sind.

Die am Thorax ausgeführte Auskultation ermöglicht eine umfangreiche Diagnostik der kardialen und pulmonalen Funktion des Patienten. Erfolgt die Auskultation an bestimmten Arterien, können mögliche stenotische Gefäßveränderungen erkannt werden. Die Untersuchung des Gastro-Intestinaltrakts kann abschnittsweise durch die Auskultation des Abdomens erfolgen und bestimmte orthopädische Gelenkerkrankungen können durch die Auskultation der Schallphänomene während des Bewegungsablaufs untersucht werden.

Da die an der Oberfläche des Körpers auftretenden Schallenergien gering sind, stellen Stethoskope hochempfindliche akustische Verstärker dar. Ihr spezifischer akustischer Aufbau legt den hörbaren Schalleindruck sowie die Lautstärke am Ohr des Untersuchers fest. In der kardiologischen Diagnostik ist es insbesondere erforderlich, niedere Frequenzen (kleiner als 50 [Hz]) zu erfassen, deshalb werden hierzu direkt anliegende membranfreie Trichter-Bruststücke appliziert, welche diese niederen Frequenzen ausleiten. Diese müssen ohne Undichtigkeit an der Hautoberfläche angewandt werden, da ansonsten ein schwerwiegender Abfall der hörbaren Lautstärke auftritt. Um höhere Frequenzen (bis zu 1 [kHz]) zu erfassen – wie dies z.B. bei der pulmonalen Auskultation erforderlich ist – und um unabhängig von Undichtigkeiten zu bleiben, werden Membran-Bruststücke appliziert.

KIRCHNER & WILHELM besitzt umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Stethoskopen höchster Qualität. Seit mehr als 60 Jahren werden in dem Unternehmen Stethoskope entwickelt, unter vielfachem Beitrag zu den Fortschritten der klinischen Auskultation.

So unterhält KaWe eine spezielle Forschungs- und Entwicklungsabteilung um weitere technische Fortschritte in der Stethoskop-Technik sicherzustellen.

Eine große Anzahl von verbessernden Stethoskop-Merkmalen folgt aus dieser langjährigen technischen Erfahrung:

Dazu gehört der Aufbau von Trichter-Bruststücken, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Undichtigkeiten entscheidend vermindern, sowie die Konstruktion von Membran-Bruststücken, welche aufgrund Ihrer Schwingeeigenschaften zu einer hochsensitiven Schallübertragung führen.

Die Trichter/Membran-Kombinations-Stethoskope erlauben eine sichere Umschaltung des jeweiligen Schallaufnehmers ohne die akustische Qualität zu vermindern. Eine große Auswahl von schalleitenden Schläuchen sowie die individuelle Einstellbarkeit der Ohrbügel sichern eine unverfälschte Schallübertragung zum Ohr des Untersuchers.

KaWe bietet eine große Auswahl von Ohröfen, welche die akustisch wichtige, passgenaue, und dennoch bequeme Platzierung im Ohrgang des Untersuchers ermöglichen. Dies ist bei höheren Untersuchungszahlen von besonderer Bedeutung.

Auscultation is a vitally important examination procedure that enables a swift diagnosis of a patient's condition. Auscultation is the perception of sound phenomena that are generated from various body organs. This is provided by stethoscopes, which are a trademark tool for any medical personnel.

Auscultation, provided at the thorax, discloses a vast amount of diagnostic information regarding the cardiac and pulmonary function. The auscultation of specific arteries can reveal information about possible stenotic processes. The functional gastric and bowel status may be examined by auscultation of the abdomen and certain orthopaedic joint disorders can be tracked by an auscultation during limb movements.

As the sound pressure levels at the body's surface are usually low, stethoscopes act as highly sensitive acoustic amplifiers. Their acoustic design defines the audible sound composition and loudness at the ear of the examiner. As, particularly in cardiologic auscultation, low frequencies (smaller than 50 [Hz]) need to be captured, membrane-free bell-type chest-pieces are applied in the low frequency region. They need to be applied tightly on the body's surface as air leakage would lead to a significant drop of diagnostic volume. In order to measure higher frequencies (up to 1 [kHz]), which is required for example, in pulmonary auscultation, and in order to avoid possible air leakage, membrane chest-pieces are used.

KIRCHNER & WILHELM has extensive experience in the design and manufacture of highly-sophisticated stethoscopes. This company has been designing innovative stethoscopes for over 60 years, thus contributing greatly to medical progress in clinical auscultation.

For this reason, the company has a separate Research and Development Department, in order to insure that technological advancements are made in the field of stethoscope technology.

A large number of improved stethoscope characteristics have emerged out of this company's many years of technological experience:

These include, the design of bell-type chest pieces, which greatly minimize the probability of the occurrence of air leakage, as well as membrane chest pieces, which, due to their oscillation characteristics, enable highly-sensitive acoustic sound transmission.

The bell and membrane combination stethoscopes can be switched from one sound sensor function to the other without compromising the acoustic characteristics of the stethoscope. A broad selection of sound conducting tubing as well as ear pieces that can be individually adjusted, ensure unaltered sound transmission to the ears of the examiner.

KaWe offers a broad range of ear tip designs, making it possible for the examiner to find an exact but comfortable fit, while at the same time maintaining the required acoustical integrity. This becomes particularly important with an increased number of patient examinations.

Stethoskope | Stethoscopes

ÜBERSICHT | OVERVIEW

ÜBERSICHT OVERVIEW	Bauart Type							Material Material					Abmessungen Dimensions						
	Doppelkopf Dual-head	Flachkopf Flat-head	Gummitrichter Rubber funnel	Kälteschutz Anti-chill protection	Kardiologie Cardiology	Pädiatrie / Neonatal Paediatrics / Neonatal	Veterinär Veterinary	Bruststück (K/E/M/A) Chest piece (K/E/M/A)	Ohrbügel (K/E/M/A) Head piece (K/E/M/A)	Schlauch, latexfrei Tube, latex-free	Bruststück, latexfrei Chest piece, latex-free	Ohrbügel zusammenlegbar Collapsible head piece	Ohrlöcher (hart/weich/drehbar) Ear tips (hard/soft/rotatable)	Doppelschlauchsystem Dual-tube system	Gesamtlänge (cm) Total length (cm)	Schlauch-Wandstärke (mm) Tube wall thickness (mm)	Trichter-Ø (mm) Funnel-Ø (mm)	Membran-Ø (mm) Diaphragm-Ø (mm)	Membranstärke (mm) Diaphragm thickness (mm)
Standard-Prestige	•			•				E	E	•	•		w+h		78	2,20	-	44	0,20
Child-Prestige	•			•		•		E	E	•	•		w+h		78	2,20	-	35	0,20
Baby-Prestige	•			•		•		E	E	•	•		w+h		78	2,20	-	28,5	0,20
Standard-Prestige light	•			•				A	A	•	•		w+h		78	2,20		44	0,20
Child-Prestige light	•			•		•		A	A	•	•		w+h		78	2,20		35	0,20
Baby-Prestige light	•			•		•		A	A	•	•		w+h		78	2,20		28,5	0,20
Profi-Kardiologie	•			•	•			E	E	•	•		w+h		64	2,50	-	45	0,20
Top-Kardiologie		•		•	•			E	E	•	•		w+h		64	2,50	-	45	0,20
Planet	•		•	•	•	•		Mn	E	•	•	•	h/d	•	70	1,80	-	42	0,20
Rapport	•			•				Mc	Mc	•	•		h	•	72	2,80	-	40/27	0,30
Kirchner COLORSCOP® Duo	•			•				KMn	Mn	•	•		h		78	2,20	-	43,8	0,20
Kirchner COLORSCOP® Plano		•		•				KMn	Mn	•	•		h		78	2,20	-	43,8	0,20
Lehrstethoskop Duo Duo training stethoscope	•			•				KMn	Mn	•	•		h		130	2,20	-	43,8	0,20
Lehrstethoskop Plano Plano training stethoscope		•		•				KMn	Mn	•	•		h		130	2,20	-	43,8	0,20
Double	•			•				A	Mc	•	•		h		80	1,50	-	43,8	0,30
Single		•		•				A	Mc	•	•		h		80	1,50	-	43,8	0,30
Petiphon			•	•		•		Mn	Mn	•	•	•	h/d	•	75	1,80	24	-	-
Suprabeil			•	•			•	Mn	Mn	•	•	•	h/d	•	88	1,80	49,5	-	-
Pinard klein small				•		•		H							17	-	-	44	-
Pinard groß large				•		•		H							33	-	-	46	-

- K

Kunststoff | plastic
- E

Edelstahl | stainless steel
- M

Messing | brass
- A

Aluminium | aluminium
- H

Holz | wood
- n

vernickelt | nickel-plated
- c

verchromt | chrome-plated
- h

hart | hard
- w

weich | soft
- d

drehbar | rotatable

Planet

KARDIOLOGIE STETHOSKOP | CARDIOLOGY STETHOSCOPE

Das Planet-Stethoskop ist seit über 35 Jahren unser erfolgreichstes Kardiologie Stethoskop. Jedes einzelne wird in unserem Hause sorgfältig hergestellt und ist ein Unikat. Die **individuelle Seriennummer**, welche im goldfarbenen Bruststück eingepreßt ist, garantiert eine lückenlose Rückverfolgung. Es gibt viele Vorzüge, die Sie von unserem Planet-Stethoskop überzeugen werden:

- Massivität des Bruststückes und hohes Auflagegewicht von 145 gr. bei nur 23 mm Bruststückhöhe (Flachbauweise) vermeiden Fingergeräusche und erzeugen eine hervorragende Resonanz, keine Neben- und Eigengeräusche.
- Verschlussfreier und dichter Drehmechanismus, zwei verschiedene Frequenzbereiche.
- Freischwingende Hochleistungsmembrane (Ø 42 mm) für feinste Auskultationsgeräusche.
- Flexibler, auswechselbarer Trichter für Originaltöne, kein Kältereiz.
- Das Doppelschlauchsystem unterstützt die überdurchschnittliche Klangqualität.

The Planet stethoscope has been our most successful cardiology stethoscope for more than 35 years. Each one is unique and is meticulously fabricated in our factory. The **individual serial number** stamped into the gold-coloured chest piece of each instrument guarantees flawless traceability. Our Planet stethoscope has many impressive features:

- The solidity of the chest piece and substantial weight of 145 gr. all in a chest piece that is only 23mm high (flat construction) eliminates sounds from the fingers and produces an excellent resonance; no ambient noise or sound from the instrument itself.
- Non-locking and air-tight turning mechanism, two different frequency ranges.
- Oscillating high-performance diaphragm (Ø 42 mm) for even the softest auscultation noises.
- Flexible, exchangeable bell for original sound, anti-chill.
- A dual-tube system that contributes to the excellent sound quality.



133

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Planet

- Doppelkopf-Stethoskop mit flexibel einstellbarem Ohrbügel
- mit freischwingender Hochleistungsmembrane Ø 42 mm
- Gesamtlänge ca. 75 cm
- umschaltbar
- überdurchschnittliche Klangqualität
- drehbare Ohröhlen

- dual-head stethoscope with a flexible, adjustable head piece
- with an oscillating high-performance diaphragm Ø 42 mm
- total length approx. 75 cm
- reversible
- superior sound quality
- with rotatable ear tips



Gewicht ca. | weight approx. 282 gr.

REF 06.22900.022

Planet-Bruststück Planet chest piece



Ø 42 mm

REF 06.95290.001

Hochleistungsmembrane High-performance diaphragm



Ø 42 mm

REF 06.96290.001

Schlauch für Planet Planet tube

Schlauchlänge ca. 60 cm
tube length approx. 60 cm



REF 06.93265.021

Ohröhlen Ear tips

drehbar
rotatable



Ø 5,5 mm

REF 06.91111.021

Prestige

AUS EDELSTAHL | MADE OF STAINLESS STEEL

Seit vielen Jahren der Klassiker unter den KaWe Stethoskopen. Das Präzisionsbruststück wird aus massivem Edelstahl gefertigt. Der in verschiedenen Farbkombinationen erhältliche Schlauch mit integriertem Ohrbügel aus Edelstahl sorgt mit seinen Softoliven für einen optimalen Tragekomfort. Jedem Stethoskop liegen zwei Paar Ersatz-Ohroliven, eine Ersatzmembran und ein Namensschild bei.

For many years, this has been KaWe's classic among its stethoscopes. The precision chest piece is made of solid stainless steel. The tubes, which are available in many different colours, with their integrated stainless steel head pieces offer the highest level of wearer comfort thanks to their soft ear tips. Each stethoscope comes equipped with two spare pairs of ear tips, a spare diaphragm and a name plate.



- Verbindungsstück mit einfacher, exakter Positionierungshilfe
- Kein Zeitverlust durch falsche Einstellung des Bruststückes
- connecting piece with simple and precise positioning aid
- no lost time due to incorrect setting on the chest piece

LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY

- Doppelkopf-Stethoskop
- 2 paar Ohroliven, schraubbar
- 1 Ersatzmembran
- Gewicht Standard: ca. 183 gr.
- Gewicht Child: ca. 137 gr.
- Gewicht Baby: ca. 128 gr.
- dual-head stethoscope
- 2 pair of ear tips, screw-on
- 1 spare diaphragm
- weight Standard: approx. 183 gr.
- weight Child: approx. 137 gr.
- weight Baby: approx. 128 gr.

Standard-Prestige Stethoskop

- Edelstahl
- umschaltbar
- Gesamtlänge ca. 78 cm

Standard-Prestige stethoscope

- stainless steel
- reversible
- total length approx. 78 cm




Prestige Bruststück

- Membran- und Trichterring aus hochwertigem, biokompatiblen, medizinischem Silikon

Prestige chest piece

- diaphragm and bell rings made of high-quality biocompatible medical grade silicone

ERSATZTEILE SPARE PARTS

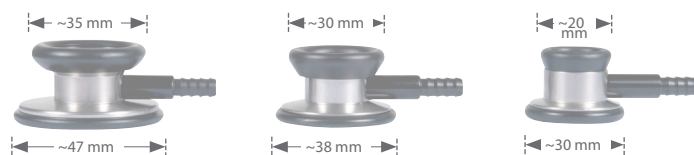

Ohrbügel mit Schlauch Head piece with tube



rot red	
schwarz black	
blau blue	
grün green neu new	
lila violet neu new	
burgund burgundy	
grau grey neu new	

Standard-Prestige	
Ø 44 mm	
REF 06.22700.012	
REF 06.22700.022	
REF 06.22700.032	
REF 06.22700.042	
REF 06.22700.092	
REF 06.22700.172	
REF 06.22700.262	

Child-Prestige	
Ø 35 mm	
REF 06.22702.012	
REF 06.22702.022	
REF 06.22702.032	
REF 06.22702.042	
REF 06.22702.092	
REF 06.22702.172	
REF 06.22702.262	

Baby-Prestige	
Ø 28,5 mm	
REF 06.22701.012	
REF 06.22701.022	
REF 06.22701.032	
REF 06.22701.042	
REF 06.22701.092	
REF 06.22701.172	
REF 06.22701.262	

	REF 06.94270.011
	REF 06.94270.021
	REF 06.94270.031
	REF 06.94270.041
	REF 06.94270.091
	REF 06.94270.171
	REF 06.94270.261

Prestige light

AUS ALUMINIUM | MADE OF ALUMINIUM

Wir haben unser Portfolio erweitert und bieten Ihnen diese erfolgreiche Stethoskopserie nun auch in Aluminium-Ausführung an. Herausragende Eigenschaften, wie die gute Klangqualität durch die glasfaserverstärkte Hochleistungsmembran, sowie das leichte Eigengewicht des Stethoskopes werden Sie überzeugen. Jedem Stethoskop liegen ein Paar Ersatz-Ohroliven und eine Ersatzmembran bei.

We have expanded our product line to include aluminium models of our Baby, Child, and Standard-Prestige stethoscopes. Outstanding characteristics such as great sound quality thanks to glass fibre-reinforced, high-performance diaphragms, and the very light weight of the stethoscope are sure to impress anyone. Each stethoscope comes equipped with a pair of replacement ear tips and replacement diaphragm.



- Verbindungsstück mit einfacher, exakter Positionierungshilfe
- Kein Zeitverlust durch falsche Einstellung des Bruststückes

- connecting piece with simple and precise positioning aid
- no lost time due to incorrect setting on the chest piece

LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY

- Doppelkopf-Stethoskop
- 1 paar Ohroliven, schraubbar
- 1 Ersatzmembran
- Gewicht Standard: ca. 124 gr.
- Gewicht Child: ca. 105 gr.
- Gewicht Baby: ca. 102 gr.
- dual-head stethoscope
- 1 pair of ear tips, screw-on
- 1 spare diaphragm
- weight Standard: approx. 124 gr.
- weight Child: approx. 105 gr.
- weight Baby: approx. 102 gr.

Standard-Prestige light Stethoskop

- Aluminium
- umschaltbar
- Gesamtlänge ca. 78 cm

Standard-Prestige light stethoscope

- aluminium
- reversible
- total length approx. 78 cm






Prestige light Bruststück

- Membran- und Trichterring aus hochwertigem, biokompatiblen, medizinischem Silikon

Prestige light chest piece

- diaphragm and bell rings made of high-quality biocompatible medical grade silicone

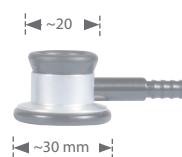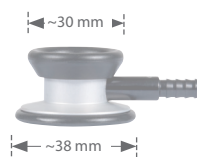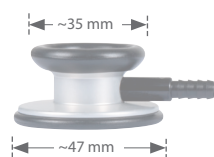

rot red	
schwarz black	
blau blue	
grün green neu new	
lila violet neu new	
grau grey	

Standard-Prestige light	
Ø 44 mm	
	REF 06.22710.012
	REF 06.22710.022
	REF 06.22710.042
	REF 06.22710.092
	REF 06.22710.232
	REF 06.22710.262

Child-Prestige light	
Ø 35 mm	
	REF 06.22712.012
	REF 06.22712.022
	REF 06.22712.232
	REF 06.22712.042
	REF 06.22712.092
	REF 06.22712.262


Baby-Prestige light	
Ø 28,5 mm	
	REF 06.22711.012
	REF 06.22711.022
	REF 06.22711.232
	REF 06.22711.042
	REF 06.22711.092
	REF 06.22711.262

Profi-Kardiologie Stethoskop | Profi Cardiology stethoscope

Das Profi-Kardiologie ist das ideale Stethoskop für den Kardiologen. Die Bruststücke der KaWe Profi-Kardiologie Stethoskope sind in massiver Edelstahlausführung gefertigt. Die hochwertige Verarbeitung und Technik garantieren eine hervorragende Akustik und überdurchschnittliche Langlebigkeit. Der im Schlauch integrierte Ohrbügel aus Edelstahl sorgt mit seinen Softoliven für einen optimalen Tragekomfort. Jedem Stethoskop liegen zwei Paar Ersatz-Ohroliven, eine Ersatz-Membrane und ein Namensschild bei.

The Profi Cardiology stethoscope is the ideal stethoscope for cardiologists. The chest piece of the KaWe Profi Cardiology stethoscope is available in solid stainless steel. These superior stethoscopes and their outstanding acoustics are crafted with high-quality workmanship and technology. This high-quality stethoscope has a single-tube system with an integrated head piece made of stainless steel. Soft ear tips ensure optimal wearer comfort. Each stethoscope comes with two spare pairs of ear tips, one spare diaphragm and a name plate.

- Profi-Kardiologie Stethoskop
- Bruststück in massiver Edelstahlausführung
- Membran Ø 45 mm
- Gesamtlänge ca. 64 cm
- umschaltbar
- Monoschlauchsystem mit integriertem Ohrbügel aus Edelstahl
- Gewicht: ca. 219 gr.
- Profi Cardiology stethoscope
- chest piece in solid stainless steel design
- diaphragm Ø 45 mm
- total length approx. 64 cm
- reversible
- single-tube system with integrated head piece of stainless steel
- weight: approx. 219 gr.

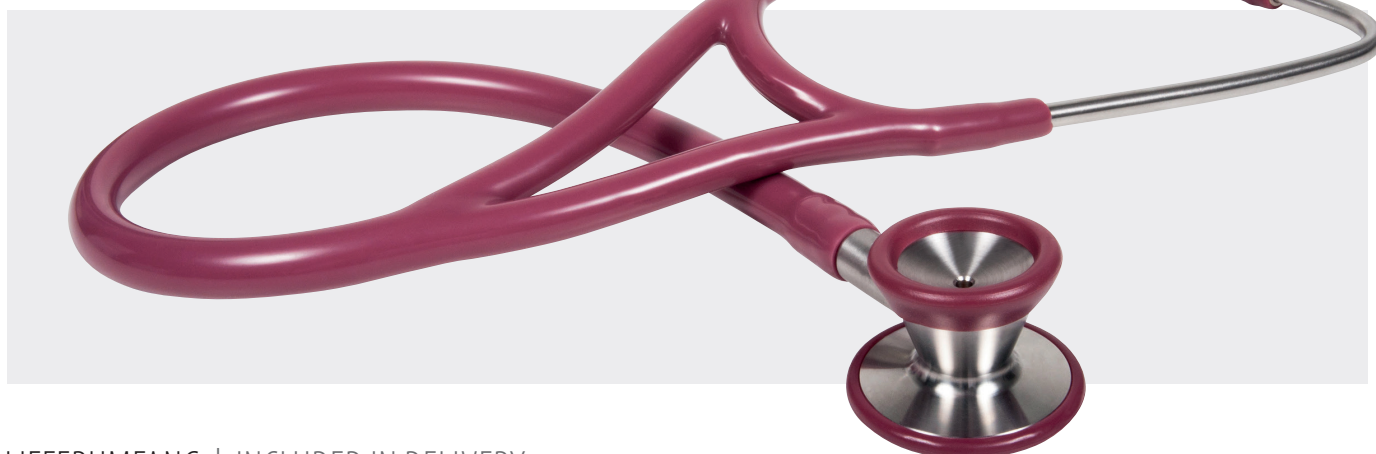

LIEFERUMFANG | INCLUDED IN DELIVERY

- Profi-Kardiologie Stethoskop
- 2 Ohroliven, schraubbar
- 2 Ohroliven, steckbar
- 1 Ersatzmembrane
- 1 Namensschild
- Profi Cardiology stethoscope
- 2 ear tips, screw-on
- 2 ear tips, plug-in
- 1 spare diaphragm
- 1 name plate

ERSATZTEILE SPARE PARTS

Profi-Kardiologie Profi Cardiology

Doppelkopf-Stethoskop
dual-head stethoscope



schwarz | black

REF 06.22800.022

burgund | burgundy

REF 06.22800.172

Ohrbügel mit Schlauch Head piece with tube

Gesamtlänge ca. 60 cm
total length approx. 60 cm



schwarz | black
burgund | burgundy

REF 06.94280.021

REF 06.94280.171

Ohroliven | Ear tips

- weich, schraubbar
- schwarz
- VE = 10 Stk.
- soft, screw-on
- black
- PU = 10 items



REF 06.91220.021

Kirchner COLORSCOP® Duo

DOPPELKOPF-STETHOSKOP | DUAL-HEAD STETHOSCOPES

Kirchner COLORSCOP® Duo Stethoskope bringen Farbe in Ihren Alltag. Wir verwenden für die Herstellung dieser Stethoskope nur hochwertige Materialien. Durch die erstklassige Verarbeitung eignet sich dieses Stethoskop hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Klinik oder im Pflegedienst für alle Untersuchungen. Das Doppelkopf-Bruststück kann von der Membran- auf die Trichterseite durch Drehen am Schlauch umgeschaltet werden. Die austauschbare Membrane ist glasfaserverstärkt und daher besonders sensibel. Die Schalltrichter sind aus Metall gefertigt und gewährleisten so eine gute Resonanz durch eine optimale Schalleitung. Die Auswahl an acht verschiedenen Farben schließt ein Verwechseln unter den Anwendern nahezu aus.

Kirchner COLORSCOP® Duo stethoscopes bring colour into your everyday routine. We use high-quality materials for the production of these stethoscopes. Due to its first-rate workmanship, this stethoscope is suited extremely well for daily use in clinics or by nurses for all types of examinations. The double-sided chest piece can be switched from diaphragm to bell mode by twisting the tube. The exchangeable diaphragm is reinforced with fibre-glass and is therefore especially sensitive. The sound bell is made of metal and therefore guarantees a good resonance because of optimal sound conduction. The available selection of eight different colours almost completely eliminates the possibility of a user mistaking their instrument for that of another.



137

ERSATZTEILE SPARE PARTS

Kirchner COLORSCOP® Duo

- das bunte Doppelkopf-Stethoskop, umschaltbar, leichtes Eigengewicht
- Membran Ø 43,8 mm
- Gesamtlänge ca. 78 cm
- Gewicht: ca. 110 gr.

- the colourful dual-head stethoscope, reversible, lightweight
- diaphragm Ø 43.8 mm
- total length approx. ca. 78 cm
- weight: approx. 110 gr.



Farbbeispiele | Example of available colours

rot red		REF 06.22100.014
schwarz black		REF 06.22100.024
blau blue		REF 06.22100.034
grün green		REF 06.22100.044



gelb yellow		REF 06.22100.054
lila violet		REF 06.22100.094
türkis turquoise		REF 06.22100.124
pink pink		REF 06.22100.134

Ohrlöwen | Ear tips

- schwarz
- Ø 5,0 mm
- VE = 10 St.
- black
- Ø 5.0 mm
- PU = 10 items



REF 06.91120.021

Double Stethoskop | Double Stethoscope

ALUMINIUM-BRUSTSTÜCK | ALUMINIUM CHEST PIECE

Das Double Doppelkopf-Stethoskop ist die preiswerte Alternative zum Kirchner COLORSCOP® Duo. Das Bruststück ist aus Aluminium gefertigt und daher besonders leicht.

The Double dual-head stethoscope is the less expensive alternative to the Kirchner COLORSCOPE® Duo. The chest piece is made of aluminium and is therefore especially lightweight.

Double-Stethoskop Double stethoscope

- Doppelkopf-Stethoskop, umschaltbar
- Aluminium-Bruststück
- Membrane Ø 43,8 mm
- Gesamtlänge ca. 80 cm
- leichtes Eigengewicht: ca. 102 gr.
- dual-head stethoscope, reversible
- aluminium chest piece
- diaphragm Ø 43.8 mm
- total length approx. 80 cm
- lightweight: approx. 102 gr.

rot red		REF 06.22300.012
-----------	---	------------------

schwarz black		REF 06.22300.022
-----------------	---	------------------

blau blue		REF 06.22300.032
-------------	---	------------------



Rapport Stethoskop | Rapport Stethoscope

Das Rapport Doppelkopf-Stethoskop mit seiner ausgezeichneten Akustik hat sich seit Jahren bewährt. In verschiedenen Farben lieferbar ist dieses Stethoskop besonders bei Studenten äußerst beliebt. Ein umfangreiches Ersatzteil-Set liegt jedem Stethoskop bei.

The Rapport dual-head stethoscope with its excellent acoustics has been proving its worth for years. This stethoscope is extremely popular among students because it is available in many different colours. Each stethoscope comes with an extensive set of spare parts.

Rapport-Stethoskop Rapport stethoscope

- Doppelkopf-Stethoskop, umschaltbar
- Membran Ø 40 mm
- Gesamtlänge ca. 72 cm
- inkl. umfangreichem Ersatzteil-Set
- Gewicht: ca. 216 gr.
- dual-head stethoscope, reversible
- diaphragm Ø 40 mm
- total length approx. 72 cm
- incl. a large spare parts set
- weight: approx. 216 gr.


rot red		REF 06.22500.012
-----------	---	------------------

schwarz black		REF 06.22500.022
-----------------	---	------------------

blau blue		REF 06.22500.032
-------------	---	------------------

grün green		REF 06.22500.042
--------------	---	------------------

lila violet		REF 06.22500.092
---------------	---	------------------

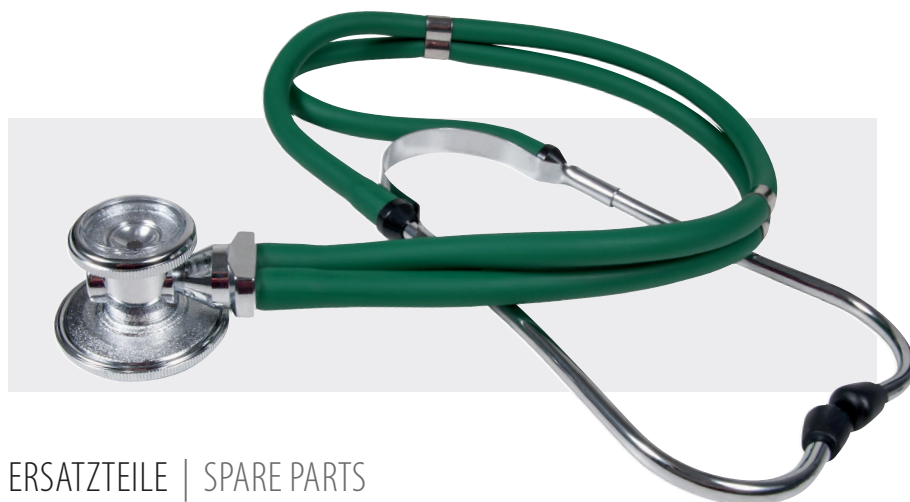

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Rapport-Ersatzteil-Etui | Rapport spare parts case

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| – 2 Paar Ohrlöwen | – 2 pairs of ear tips |
| – 3 Aufsatztrichter | – 3 attachment funnels, |
| – Ø 19,5 / 26,0 / 33,0 mm | – Ø 19.5 / 26.0 / 33.0 mm |
| – 2 Membranen | – 2 diaphragms |
| – 1 Schlüssel | – 1 wrench |



nur als Set erhältlich | available only as a set

REF 06.99250.001

Top-Kardiologie | Top Cardiology

FLACHKOPF-STETHOSKOP | FLAT-HEAD STETHOSCOPE

Das Top-Kardiologie Stethoskop ist das ideale Stethoskop für den Kardiologen. Die Bruststücke der KaWe Top-Kardiologie Stethoskope sind in massiver Edelstahlausführung gefertigt. Anhand der hochwertigen Verarbeitung und Technik wurden Qualitäts-Stethoskope mit hervorragender Akustik geschaffen. Dieses hochwertige Stethoskop verfügt über ein Monoschlauchsystem mit integriertem Ohrbügel aus Edelstahl, weiche Softoliven sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Jedem Stethoskop liegen zwei Paar Ersatz-Ohroliven, eine Ersatz-Membrane und ein Namensschild bei.

The Top Cardiology stethoscope is the ideal stethoscope for cardiologists. The chest pieces of the KaWe Top Cardiology stethoscope are crafted from solid stainless steel. These quality stethoscopes with excellent acoustics were developed using high-quality craftsmanship and technology. This high-quality stethoscope has a single-tube system with an integrated head piece made of stainless steel; soft ear tips ensure optimal wearer comfort. Each stethoscope comes equipped with two spare pairs of ear tips, one spare diaphragm and a name plate.

- Flachkopf-Stethoskop
- Edelstahl
- Membran Ø 45 mm
- Gesamtlänge ca. 64 cm
- Monoschlauchsystem mit integriertem Ohrbügel aus Edelstahl
- das ideale Stethoskop für den Kardiologen
- inkl. Ersatzteil-Set
- Gewicht: ca. 210 gr.

- flat-head stethoscope
- stainless steel
- diaphragm Ø 45 mm
- total length approx. 64 cm
- single-tube system with integrated head piece made of stainless steel
- the ideal stethoscope for cardiologists
- incl. spare parts set
- weight: approx. 210 gr.



139

LIEFERUMFANG | INCLUDED IN DELIVERY

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| – Top-Kardiologie Stethoskop | – Top Cardiology stethoscope |
| – 2 Ohroliven, schraubbar | – 2 ear tips, screw-on |
| – 2 Ohroliven, steckbar | – 2 ear tips, slide-on |
| – 1 Ersatzmembrane | – 1 spare diaphragm |
| – 1 Namensschild | – 1 name plate |

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Top-Kardiologie Top Cardiology

Flachkopf-Stethoskop
flat-head stethoscope



schwarz | black



REF 06.10800.022

burgund | burgundy



REF 06.10800.172

Ohrbügel mit Schlauch Head piece with tube

Gesamtlänge ca. 60 cm
total length approx. 60 cm



schwarz | black
burgund | burgundy



REF 06.94280.021



REF 06.94280.171

Ohroliven | Ear tips

- weich, schraubbar
- schwarz
- VE = 10 Stk.
- soft, screw-on
- black
- PU = 10 items



REF 06.91220.021

Kirchner COLORSCOP® Plano

FLACHKOPF-STETHOSKOP | FLAT-HEAD STETHOSCOPES

Kirchner COLORSCOP® Plano Stethoskope bringen Farbe in Ihren Alltag. Wir verwenden für die Herstellung dieser Stethoskope nur hochwertige Materialien. Durch die erstklassige Verarbeitung eignen sich diese Stethoskope hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Klinik oder im Pflegedienst unter anderem sehr gut zur Blutdruckmessung, da sie sehr gut unter jede Blutdruckmanschette passen. Die auswechselbare Membrane ist glasfaserverstärkt und daher besonders sensibel. Die Schalltrichter sind aus Metall gefertigt und gewährleisten so eine gute Resonanz durch eine optimale Schallleitung. Die Auswahl an acht verschiedenen Farben schließt ein Verwechseln unter den Anwendern nahezu aus.


Kirchner COLORSCOP® Plano stethoscopes bring colour into your daily routine. We only use high-quality materials for the manufacture of this stethoscope. Due to its top-rate craftsmanship, this stethoscope is extremely well suited for daily use in doctoral or nursing clinics for (among other things) measuring blood pressure as it fits very well under any blood pressure cuff. The exchangeable diaphragm is reinforced with fibreglass and is therefore especially sensitive. The sound bell is made of metal and therefore guarantees a good resonance because of optimal sound conduction. The available selection of eight different colours almost completely eliminates the possibility of a user mistaking their instrument for that of another.



ERSATZTEILE SPARE PARTS

Kirchner COLORSCOP® Plano

- das bunte Flachkopf-Stethoskop
- Membrane Ø 43,8 mm
- Gesamtlänge ca. 78 cm
- leichtes Eigengewicht: ca. 99 gr.
- the colourful flat-head stethoscope
- diaphragm Ø 43.8 mm
- total length approx. ca. 78 cm
- lightweight: approx. 99 gr.

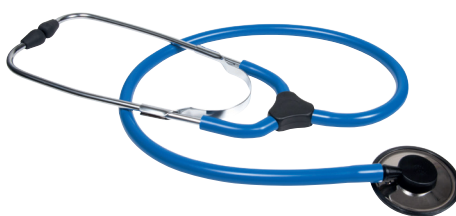

Farbbeispiele | Example of available colours

rot red		REF 06.10100.014
schwarz black		REF 06.10100.024
blau blue		REF 06.10100.034
grün green		REF 06.10100.044

gelb yellow		REF 06.10100.054
lila violet		REF 06.10100.094
türkis turquoise		REF 06.10100.124
pink pink		REF 06.10100.134

Ohroliven | Ear tips

- schwarz
- Ø 5,0 mm
- VE = 10 St.
- black
- Ø 5.0 mm
- PU = 10 items



REF 06.91120.021

Single Stethoskop | Single stethoscope

ALUMINIUM-BRUSTSTÜCK | ALUMINIUM CHEST PIECE

Das Single Flachkopf-Stethoskop ist die preiswerte Alternative zum Kirchner COLORSCOP® Plano. Das Bruststück ist aus Aluminium gefertigt und daher besonders leicht.

The Single flat-head stethoscope is the less expensive alternative to the Kirchner COLORSCOP® Plano. The chest piece is made of aluminium and is therefore especially lightweight.



141

Single-Stethoskop Single stethoscope

- Flachkopf-Stethoskop mit Aluminium-Bruststück
- Membrane Ø 43,8 mm
- Gesamtlänge ca. 80 cm
- leichtes Eigengewicht: ca. 84 gr.

- flat-head stethoscope with aluminium chest piece
- diaphragm Ø 43.8 mm
- total length approx. 80 cm
- lightweight:
approx. 84 gr.



rot | red



REF 06.10300.012

schwarz | black



REF 06.10300.022

blau | blue



REF 06.10300.032



Petiphon-Stethoskope | Petiphon stethoscopes

FÜR DIE PÄDIATRIE | FOR PAEDIATRICS

Die Trichter-Stethoskope funktionieren im Gegensatz zu den Membran-Stethoskopen wie die Ohrmuschel des Menschen und haben dadurch sehr gute Höreigenschaften. Durch das Andrücken des Trichters wird das Geräusch sogar noch lauter. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Schall gleich vom Trichter aufgenommen wird. Bei den Trichtern hört der Anwender über den gesamten Durchmesser gleich, bei den Membran-Stethoskopen hört man nur in der Mitte.

Die robust gefertigten Metall-Bruststücke werden Ihnen viele Jahre zuverlässig dienen, die Aufsatztrichter können problemlos ausgetauscht werden und tragen so ihren Teil zur Hygiene im Praxisalltag bei. Das Doppelschlauchsystem sorgt für eine gute Akustik und mit dem zusammenlegbaren Ohrbügel lässt sich das Stethoskop leicht in jeder Kitteltasche verstauen.

Bell type stethoscopes operate (unlike diaphragm stethoscopes) similarly to the human concha and can therefore detect sound very well. By pressing on the bell, the sound is amplified even further. A further advantage is that the sound is captured directly by the bell. With the bells, the user hears sound evenly over the entire diameter of the bell. With diaphragm stethoscopes, one can only hear sound in the very middle.

The robustly-crafted metal chest pieces will serve you dependably for many years. The bell can be easily removed for cleaning, therefore guaranteeing a high hygienic standard for your daily medical practice routine. The double-tube system ensures good acoustics and together with the collapsible head piece, this stethoscope can be easily stowed in any lab coat pocket.

Speziell für Kinder wurde das Petiphon-Stethoskop entwickelt. Der Durchmesser des Trichters wurde für die Körper Ihrer kleinen Patienten konzipiert und wird durch den hochflexiblen Silikon-Trichter als angenehm warm empfunden.

The Petiphon stethoscope was developed especially for children. The diameter of the bell was conceptualised to better fit the bodies of your small patients and is comfortably warm to the touch thanks to the highly-flexible silicone bell.



ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Petiphon-Stethoskop Petiphon stethoscope

- Trichter-Stethoskop
- mit drehbaren Ohroliven
- flexibel einstellbarer Ohrbügel
- Trichter Ø 24 mm
- Gesamtlänge ca. 75 cm
- Gewicht: ca. 190 gr.

- bell type stethoscope
- with rotatable ear tips
- flexible, adjustable head piece
- bell Ø 24 mm
- total length approx. 75 cm
- weight: approx. 190 gr.



REF 06.46201.182

Aufsatztrichter Detachable funnel

- schwarz
- Ø 24 mm
- black
- Ø 24 mm



REF 06.98621.001

Ohroliven | Ear tips

- drehbar
- Ø 5,0 mm
- VE = 10 Stk.



- rotatable
- Ø 5.0 mm
- PU = 10 items

REF 06.91111.021

Bruststück | Chest piece

- aus Metall, Ø 24 mm
- made of metal, Ø 24 mm



REF 06.95621.001



Suprabel-Stethoskop | Suprabel stethoscope

FÜR DEN VETERINÄR | FOR VETERINARIANS



143



Suprabel-Stethoskop Suprabel stethoscope

- Trichter-Stethoskop mit drehbaren Ohroliven
- flexibel einstellbarer Ohrbügel
- Trichter Ø 49,5 mm
- Gesamtlänge ca. 88 cm
- Gewicht: ca. 240 gr.

- bell type stethoscope with rotatable ear tips
- flexible, adjustable head piece
- bell Ø 49.5 mm
- total length approx. 88 cm
- weight: approx. 240 gr.



REF 06.46418.182

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Aufsatztrichter Detachable funnel

- schwarz
- Ø 49,5 mm
- black
- Ø 49,5 mm



REF 06.98648.001

Bruststück | chest piece

- aus Metall, Ø 49,5 mm
- made of metal, Ø 49,5 mm



REF 06.95648.001

Ohroliven | Ear tips

- drehbar
- Ø 5,5 mm
- VE = 10 Stk.



- rotatable
- Ø 5.5 mm
- PU = 10 items

REF 06.91111.021

Plano/Duo Stethoskope | Plano/Duo stethoscopes

SCHWESTERN-LEHR-STETHOSKOP | TRAINING STETHOSCOPES FOR NURSES

Die Grundkomponenten unserer Schwestern-Lehr-Stethoskope sind das Kirchner COLORSCOP®-Plano bzw. -Duo. Das Schwestern-Lehr-Stethoskop besteht aus zwei Ohrbügeln, einem 110 cm langen Schlauch und einem Flach- oder Doppelkopf-Bruststück. Somit können zwei Personen gleichzeitig die Untersuchung vornehmen.

Our training stethoscopes for nurses are the Kirchner COLORSCOP® Plano and Duo. The training stethoscopes for nurses consist of two head pieces, a 110 cm-long tube and one flat-headed or dual-headed chest piece. With this instrument, two people can perform an examination at the same time.

- mit 2 Ohrbügeln
- Membrane Ø 43,8 mm
- Gesamtlänge ca. 130 cm
- Gewicht Plano: ca. 210 gr.
- Gewicht Duo: ca. 225 gr.

- with 2 head pieces
- diaphragm Ø 43.8 mm
- total length approx. 130 cm
- weight Plano: approx. 210 gr.
- weight Duo: approx. 225 gr.



144

Schwester-Lehr-Stethoskop Training stethoscope for nurses

- Plano, rot-gelb
- Flachkopf-Stethoskop
- Plano, red-yellow
- flat-head stethoscope



Plano  REF 06.34100.144

- Duo, rot-gelb
- Doppelkopf-Stethoskop
- umschaltbar
- Duo, red-yellow
- dual-head stethoscope
- reversible



Duo  REF 06.34200.144

ERSATZTEILE SPARE PARTS

Ohroliven | Ear tips

- schwarz, Ø 5,0 mm
- VE = 10 St.
- black, Ø 5.0 mm
- PU = 10 items



 REF 06.91120.021

Pinard-Stethoskope | Pinard stethoscopes

STETHOSKOP AUS BUCHENHOLZ | STETHOSCOPE MADE OF BEECHWOOD



145

Das Pinard-Stethoskop ist ein geburtshilfliches Stethoskop und wurde 1895 von dem französischen Arzt und Geburtshelfer Adolphe Pinard entwickelt. Es wird aus Buchenholz gefertigt und ist ideal für alle Hebammen und werdenden Eltern und ermöglicht das Abhören der Herztöne eines ungeborenen Kindes.

The Pinard stethoscope is an obstetric stethoscope that was developed in 1895 by the French doctor and obstetrician Adolphe Pinard. It is made of beechwood and is ideal for midwives and expectant parents and enables one to hear the heartbeat of the unborn child.

Holländisches ►
Modell

Dutch model

Pinard-Stethoskop | Pinard stethoscope

- Buchenholz
- ca. 17 cm lang
- Ø 44 mm
- Gewicht: ca. 45 gr.
- beechwood
- approx. 17 cm long
- Ø 44 mm
- weight: approx. 45 gr.

1

REF 06.46117.001

- Buchenholz
- ca. 33 cm lang
- Ø 46 mm
- Gewicht: ca. 65 gr.
- beechwood
- approx. 33 cm long
- Ø 46 mm
- weight: approx. 65 gr.

2

REF 06.46133.001



Zubehör | Accessories

OHRBÜGEL | HEAD PIECES

Ohrbügel, klein | Head piece, small

- ohne drehbare Ohroliven
- without rotatable ear tips



für | for REF
06.10100.014 - 06.10100.134,
06.22100.014 - 06.22100.134,
06.34100.144 - 06.34200.144

Rohr | tube Ø 5 mm

REF 06.92100.001

Ohrbügel, groß | Head piece, large

- mit drehbaren Ohroliven
- zusammenlegbar
- für schwarze Doppelschläuche
- angedreht



für | for REF
06.46201.182, 06.46418.182, 06.22900.022

Rohr | tube Ø 7 mm

REF 06.92400.001


SCHLÄUCHE | TUBES



Farbbeispiele | Example of available colours

Monoschläuche | Single tubes

- für Kirchner COLORSCOP®
- ca. 55 cm lang
- inkl. Y-Stück
- for Kirchner COLORSCOP®
- length approx. 55 cm
- incl. Y-piece

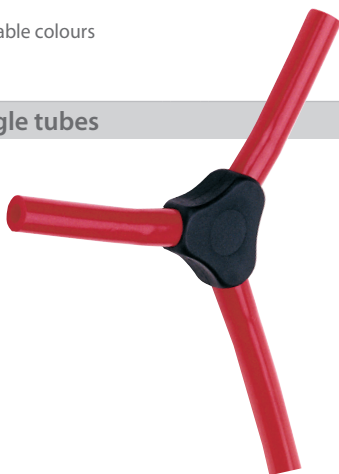

für | for REF
06.10100.014 - 06.10100.134,
06.22100.014 - 06.22100.134

rot red		REF 06.93154.011
schwarz black		REF 06.93154.021
blau blue		REF 06.93154.031
grün green		REF 06.93154.041
gelb yellow		REF 06.93154.051
lila violet		REF 06.93154.091
türkis turquoise		REF 06.93154.121
pink pink		REF 06.93154.131

Doppelschläuche Dual channel tubes

schwarz
black



ca. 60 cm lang
approx. 60 cm long

für | for REF
06.22900.022, 06.46201.182

REF 06.93265.021

ca. 75 cm lang
approx. 75 cm long

für | for REF
06.46418.182, 06.46300.182

REF 06.93275.021

pro lfdm.
by the meter

für | for REF
06.22900.022, 06.46201.182, 06.46418.182, 06.46300.182

REF 06.93294.021

Zubehör | Accessories

OHROLIVEN | EARTIPS

Ohroliven | Ear tips



schwarz, VE = 10 St.
black, PU = 10 items

Ø 6,5 mm

REF 06.91110.021

Ohroliven | Ear tips

drehbar
rotatable



schwarz, VE = 10 St.
black, PU = 10 items

Ø 5,5 mm

REF 06.91111.021

Ohroliven | Ear tips



schwarz, VE = 10 St.
black, PU = 10 items

Ø 5,0 mm

REF 06.91120.021

Ohroliven | Ear tips

drehbar
rotatable



schwarz, VE = 10 St.
black, PU = 10 items

Ø 3,5 mm

REF 06.91121.021

Ohroliven | Ear tips

Für Prestige-Linie
weich, schraubbar

for the Prestige-line
soft, screw-on



schwarz, VE = 10 St.
black, PU = 10 items

REF 06.91210.021

Ohroliven | Ear tips

Für Kardiologie-Linie
weich, schraubbar

for the Cardiology-line
soft, screw-on



schwarz, VE = 10 St.
black, PU = 10 items

REF 06.91220.021



147

SONSTIGES | OTHER ARTICLES

Y-Schlauchstück Y-tube piece

schwarz, aus Kunststoff
black, made of plastic



für | for REF

06.10100.014 - 06.10100.134,
06.22100.014 - 06.22100.134,
06.34100.144, 06.34200.144

REF 06.99020.021

Namensschild Name plate

passend für alle
KaWe-Stethoskope

suitable for all
KaWe stethoscopes



VE = 10 St.
PU = 10 items

REF 06.99010.001

